




GEBRAUCHSANWEISUNG „Rapid SARS-CoV-2 Antigen Card“ (BOSON BIOTECH)

In der Folge sind die wichtigsten Schritte, bezogen auf die Durchführung und Interpretation des Selbsttests für den Nachweis der SARS-CoV-2 Antigene, angeführt. Für weitere Details kann der Beipackzettel des Testkits konsultiert werden.

VORBEREITUNG

- 1) Erforderlich ist eine ebene, saubere und trockene Oberfläche; einen Zeitnehmer verwenden.
- 2) Den Inhalt des Testkits kontrollieren und sich vergewissern, dass nichts beschädigt oder zerbrochen ist
- 3) Die Nase putzen (schnäuzen)
- 4) Die Hände waschen

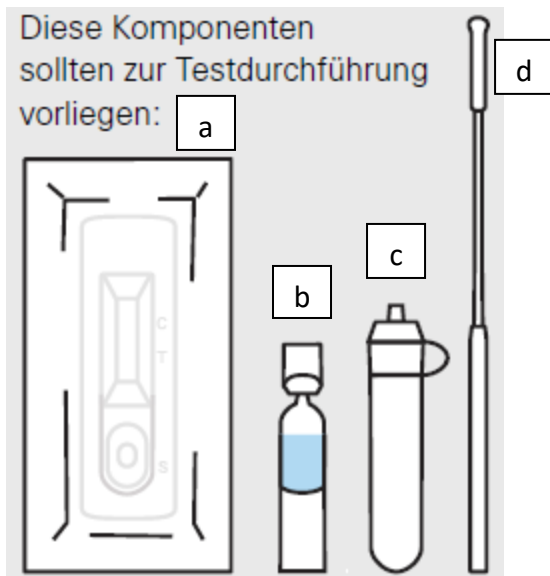

Für jeden einzelnen Test sind vorgesehen:


- a) Einzeln verpackte Testkassette;
- b) Extraktionslösung (versiegelt);
- c) Teströhrchen;
- d) Einzeln verpackter Tupfer für das Sammeln des Probenmaterials

1




- 1)
- Die Testkassette aus der eigenen Konfektion entnehmen und auf die vorbereitete Oberfläche auflegen (NB: die Kassette muss sofort nach dem Öffnen verwendet werden)
 - Extraktionslösung öffnen
 - Den gesamten Inhalt in das Teströhrchen einfüllen, Bildung von Luftblasen vermeiden

RACCOLTA DEL CAMPIONE

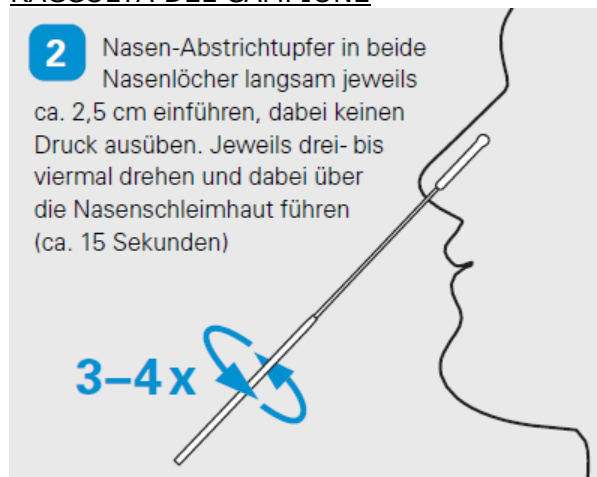

- 2)
- Den Tupfer nach dem Entnehmen aus der Konfektion sanft in ein Nasenloch einführen; die Spitze des Tupfers muss mindestens 2,5 cm weit eingeführt werden, ohne Druckausübung (NB: den Tupfer nicht tiefer einführen wenn Widerstand oder Schmerz empfunden wird).
 - Den Tupfer 4 Mal im Inneren des Nasenlochs drehen und dabei über die Nasenschleimhaut führen. Den Tupfer für einige Sekunden im Nasenloch belassen.
 - Die Prozedur MIT DEMSELBEN TUPFER im anderen Nasenloch wiederholen.

TRATTAMENTO DEL CAMPIONE ED ESECUZIONE DEL TEST

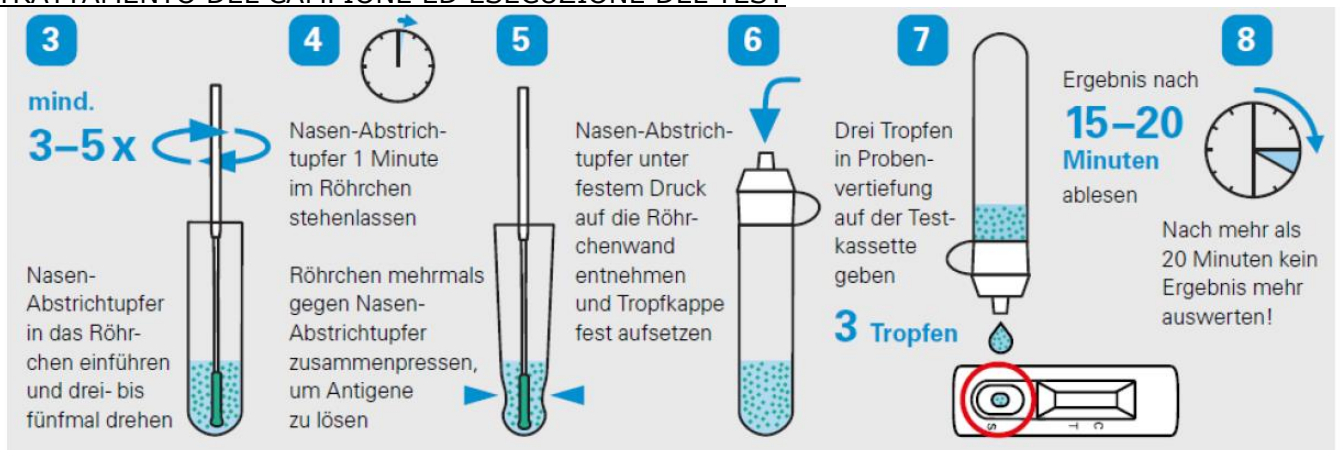


- 3) Den Tupfer in das Röhrchen einfügen, welches vorher mit der Extraktionslösung gefüllt wurde, und nach Einfügen der Tupferspitze 5 Mal drehen
- 4) Den Tupfer 1 Minute lang im Röhrchen belassen

Überwachung durch Nasenabstriche nach Auftreten eines positiven Falls im schulischen Kontext, im Zeitraum zwischen dem 24.12.2021 und dem 09.01.2022 - Anhang 1 (Dokument vom 17.12.2021)



- 5) Das Röhrchen mehrmals zusammendrücken, wobei der Tupfer im Inneren zusammengepresst wird, um die Freisetzung der Flüssigkeit zu erleichtern. Den Tupfer herausnehmen und eliminieren.
- 6) Das Röhrchen mit dem Tropfstopfen (Tropfenzähler) verschließen.
- 7) 3 Tropfen des Probenmaterials in die Vertiefung der Testkassette, welche mit dem Buchstaben "S" gekennzeichnet ist, einfügen, wobei darauf geachtet wird dass sich keine Luftblasen bilden.
- 8) Das Ergebnis kann nach 15 - 20 Minuten abgelesen werden. Ergebnisse nicht nach mehr als 20 Minuten ablesen.

INTERPRETATION DES ERGEBNISSES

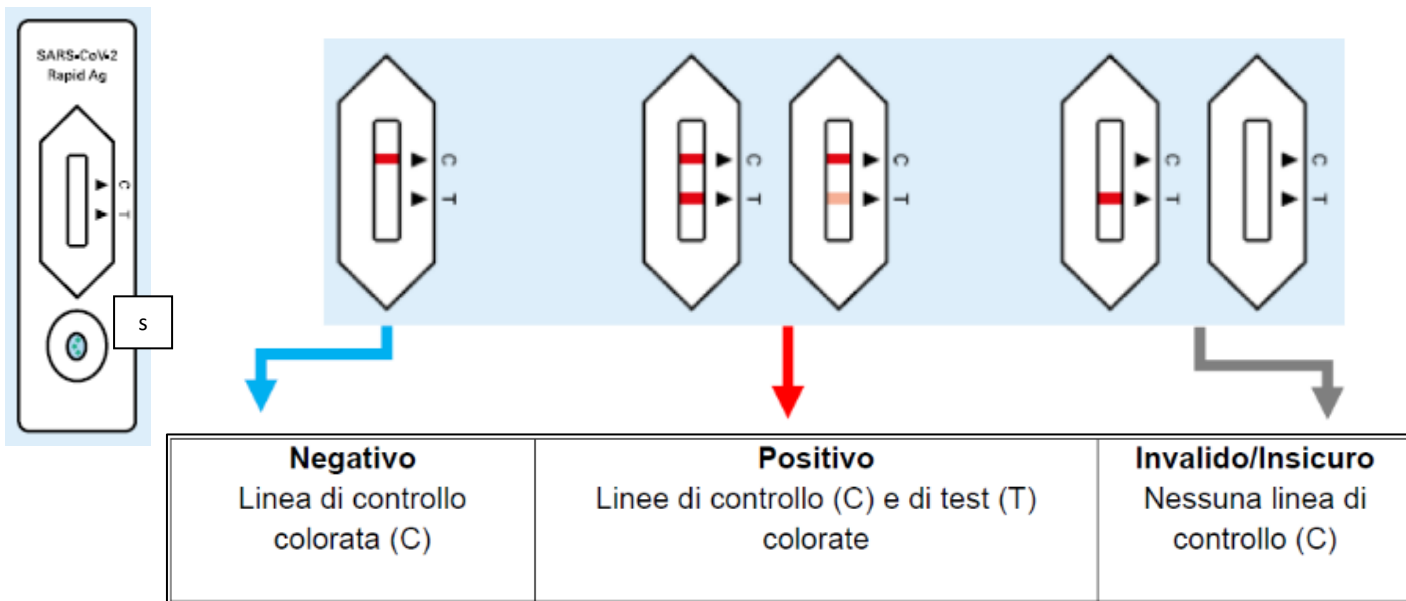

Das verwendete Material, entsprechend den lokalen Bestimmungen, mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

ZU ERGREIFENDE MAßNAHMEN

NEGATIVES TESTERGEBNIS: die Antigen-Schnelltests sind eine der Maßnahmen welche angewandt werden, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu bringen. Auch bei negativem Testergebnis, wenn auch hierbei keine hohe Viruslast vorliegt, kann die Infektion nicht vollständig ausgeschlossen werden; es ist deshalb immer wichtig die anderen einfachen Eindämmungsmaßnahmen einzuhalten, das heißt

- Abstand halten
- Nase und Mund mit einer Maske bedecken
- Hände waschen

Überwachung durch Nasenabstriche nach Auftreten eines positiven Falls im schulischen Kontext, im Zeitraum zwischen dem 24.12.2021 und dem 09.01.2022 - Anhang 1 (Dokument vom 17.12.2021)



- Husten und Niesen nur in die Armbeuge
- Räume regelmäßig lüften

Es ist notwendig, die Überwachung durch Selbsttests regelmäßig im üblichen Rhythmus weiter zu führen.

ERGEBNIS NICHT INTERPRETIERBAR: den Test wiederholen, wobei vorher die Nase gut geputzt wird (schnäuzen).

POSITIVES TESTERGEBNIS: Das Verfahren sieht einen Zugang zum <https://covidmonitor.sabes.it/schule> vor, mit der Möglichkeit, das Antragsformular für einen Antigenschnelltest mittels Nasen-Rachen-Abstrich herunterzuladen, welcher bei Ihrem Hausarzt, dem Kinderarzt freier Wahl, oder einer territorialen Apotheke, kostenlos für den Benutzer, durchgeführt werden kann.

Nach einem positiven, selbst durchgeführten Nasenabstrich, muss der diagnostische Test so schnell wie möglich durchgeführt werden. Jeder vom Hausarzt, oder der Apotheke durchgeführte positive Antigentest erfordert die Einhaltung der bereits vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit (häusliche Isolierung und Quarantäne für enge Kontakte).

Die Epidemiologische Überwachungseinheit wird die positiv getestete Person so bald wie möglich für die epidemiologische Untersuchung kontaktieren.



